

電位治療器 医家向保険適用

レルテック MD21

医療機器認証番号 302ABBZX00088000

効 能 効 果

頭 痛

肩こり

不眠症

慢性便秘

の緩解



レルテック MD21 YD 仕様

希望小売価格

1,120,000 円 (税込 1,232,000 円)

出力極板AC… 2本、0V極板YD… 2本
極板ケーブルの長さ… 2.5m または 4m
外形寸法 300(W)×110(H)×280(D)(mm)



レルテック MD21 BD 仕様

希望小売価格

1,120,000 円 (税込 1,232,000 円)

出力極板AC… 2本、0V極板BD… 2本
極板ケーブルの長さ… 2.5m または 4m
外形寸法 300(W)×110(H)×280(D)(mm)

2 ステップで治療スタート

STEP 1

主電源を押す

主電源スイッチを押して「ON」にしてください。
出力選択のLEDおよび表示部が点灯します。

STEP 2

運転ボタン

運転ボタンを押すとボタン上部のLEDが点灯し、治療が開始されます。



※ 治療時間の設定、また終了音及び操作音量の設定等は別になります。

治療時間・治療回数

標準的な治療例

期 間	初 日	2 日 目	3 日 目	4 日 目	5 日 目	6 日 目	7 日 目	8 日 目 ~
1 回 の 治 療 時 間 (例)	約 5 分			約 10 分				約 15~30 分
1 日 の 治 療 回 数 (例)	1 日 1 回 ~ 5 回 治 療							

治療時間・治療回数は医師の指導に従ってください。治療と治療の間は1時間以上あけてください。



レルテック MD21 YD仕様/BD仕様

医療機器認証番号 302ABBZX00088000

本体各部の名称と機能

[正面]

出力表示ランプ (点灯)

出力選択ボタンで選択した出力箇所が点灯します。

出力選択ボタン

出力箇所を選択します。

主電源スイッチ

○印が「切」OFF ●印が「入」ON

「+」「-」ボタン

ボタンを押すことで治療時間の設定、終了音量および操作音量の設定ができます。

[背面]

定格ラベル

製造番号等が記載されています。

ACアダプター用ソケット

接続不良 (点滅)

極板プラグが正しく差し込まれていないときに、LED ランプが点滅し、エラー音が鳴ります。

表示部

設定した治療時間が表示されます。
また終了音量および操作音量の設定時のみ音量が表示されます。エラー時のエラーコードもここに表示されます。
※エラーコード (詳細は取扱説明書 L11)

出力極板AC用ソケット (色:グレー)

0V極板YD/BD用ソケット (色:白)

決定ボタン

「+」「-」ボタンで設定した治療時間と出力選択ボタンで選択した出力箇所、終了音量および操作音量を記憶させることができます。(詳細は取扱説明書 L11)

運転ボタン (点灯)

運転の「入/切」ができます。
運転中はLED ランプが点灯します。

レルテック MD21 YD仕様 / BD仕様

一般的名称	電位治療器	出力数	3パターン（出力1、出力2、出力1＋2）	
機器の分類	管理医療機器（特定保守管理医療機器）	安全装置	・ 極板プラグが抜けた時、運転の自動停止 ・ 極板プラグが正常に挿入されていない時、運転しない ・ 過電流保護 出力部に保護抵抗を直列接続して電流の流れを制限	
販売名	レルテックMD21			
型 式	MD21			
外形寸法	300(W)×110(H)×280(D)(mm)			
定格電圧	100-240 V ～（日本国内での使用の場合、AC100Vに限定）	電撃保護分類	クラスⅠ 機器	
定格周波数	50-60 Hz	電撃保護の程度	B F 形装着部	
電源入力	50VA	外郭保護分類	IPX0	
重 量	約2.2kg（治療器本体）	作動モード	連続運転	
治療時間	任意設定（1分～99分）	医療機器認証番号	302ABBZX00088000	
出力電圧	直流 ー5500±500 V			
基本性能	本製品の基本性能は「出力電圧DC-5500V±500V」です。電磁妨害により基本性能が喪失または低下した場合、表示部が点滅したり、操作不能になることがあります。その際は、機器本体の電源を切り、治療を中止してください。	使用・保管環境	使用温度	10～39℃
			使用湿度	30～85％RH（結露なきこと）
			輸送・保管温度	0 ～50℃
			輸送・保管湿度	10～90％RH（結露なきこと）

付属品

	YD仕様	BD仕様
出力極板AC(2.5m / 4m)	2本	2本
0V極板YD(2.5m / 4m)	2本	—
0V極板BD(2.5m / 4m)	—	2本
カバー小	4枚	4枚
カバー特小	8枚	4枚
ベルト特小W(長さ30cm)	4本	2本
ベルト中(長さ80cm)	1本	1本
ACアダプター(1.25m)	1個	1個
電源コード(2m)	1本	1本
接地アダプター	1個	1個
取扱説明書	1部	1部
絶縁マット(90cm×190cm)	1枚	1枚
エナジーチェック	1個	1個
スパイラルチューブ(2.5m / 4m)	10本/16本	10本/16本

※ベルト大(長さ120cm): 別売り
ご入用の場合は、販売店にお問合せください。

※掲載した製品の仕様や外観は改良等の理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


出力極板/0V極板について

極板は消耗品です。

効能や効果を十分に維持するために、出力極板 AC は1年毎の交換をおすすめします。また、断線・破損した0V極板を使用すると、感電や電撃を受けるおそれがありますので、0V極板 YD/BD は1～2年毎の点検をおすすめします。



エナジーチェック (ENERGY CHECK)

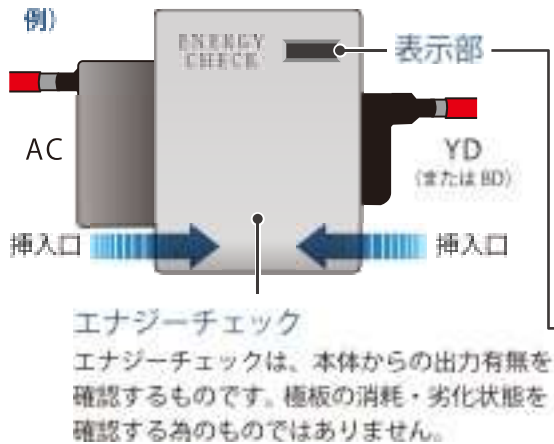

エナジーチェックは、治療器の使用前の点検に用いる検査機器です。

- ① エナジーチェックを水平な場所に置いて各挿入口に出力極板 AC と 0V極板 YD/BD のプレート差し込んでください。
- ② 治療器を運転状態にします。
- ③ 異常がなければエナジーチェック表示部に「OK」表示が点灯します。(OK が一瞬でも表示されれば正常です。)

※点検中は、出力極板 AC・0V極板 YD/BD に触れないようにしてください。必ず極板カバーを外して点検してください。

※詳しくは取扱説明書をご覧ください。